

この添付文書をよく読んでから使用してください。
また、必要時に読めるように保管しておいてください。

届出番号 26E1X80010000001

体外診断用医薬品

*2020年1月改訂(第4版)

**2018年5月改訂(第3版)

Code No. 474-11651

遊離トリヨードサイロニンキット アキュラシード FT3

(化学発光酵素免疫測定法)

〔全般的な注意〕

- (1) 本製品は体外診断用であり、それ以外の目的に使用しないでください。
- (2) この添付文書に記載された使用方法に従って使用してください。記載された使用方法および使用目的以外での使用については、測定値の信頼性を保証しかねます。
- (3) 測定機器は添付文書および取扱説明書に従い、適切な条件下で使用してください。なお、詳細については、機器メーカーに問い合わせてください。
- (4) 測定結果に基づく臨床診断は、臨床症状や他の検査結果と併せて担当医師が総合的に判断してください。

〔形状・構造等(キットの構成)〕

試薬カートリッジ

- (1) 抗体結合粒子(R0)
(抗ヒツジ IgG ポリクローナル抗体(ウサギ)結合粒子)
- (2) 免疫反应用緩衝液(R1)
(抗 T3 モノクローナル抗体(ヒツジ))
- (3) 酵素標識抗原(R2)
(ペルオキシダーゼ標識 T3)
- (4) 基質液(R3) (ルミノール)
- (5) 過酸化水素液(R4) (過酸化水素)

〔使用目的〕

血清又は血漿中の遊離トリヨードサイロニン(FT3)の測定(甲状腺疾患の診断補助等)

〔測定原理〕

本法は粒子を固相とした化学発光酵素免疫測定法に基づきます。抗ヒツジ IgG ポリクローナル抗体(ウサギ)結合粒子に、抗 T3 モノクローナル抗体(ヒツジ)と検体中の FT3 を反応させ、次いでペルオキシダーゼ標識 T3 を競争的に反応させます。抗体結合粒子に結合した酵素の量は FT3 濃度に逆比例しますので、その酵素活性を化学発光試薬(ルミノール、過酸化水素)を用いて測定することにより、あらかじめ既知濃度の標準液を用いて作成した検量線から検体中の FT3 濃度を求めることができます。

〔操作上の注意〕

** <測定試料の性質、採取法>

- (1) 検体は血清又は血漿を使用してください。
- (2) 採取後の検体は速やかに測定してください。
- (3) 検体を保存する場合は-20℃以下で凍結保存してください。
- (4) 凍結検体の使用に際しては素早く融解し、すぐに測定を行ってください。再測定が予想される場合はあらかじめ必要量を再測定用として小分けして凍結保存するなどし、凍結融解の繰り返しは避けてください。
- (5) 抗凝固剤のヘパリン、クエン酸塩、シュウ酸塩、EDTA および解糖阻剤のフッ化ナトリウムは通常使用量では測定値に影響を与えません。
- (6) 採血管の使用方法は、採血管製造販売元の添付文書に従ってください。
- (7) 血清を試料とする場合は、血餅の凝固が十分であることを目視にて確認してから遠心分離を行ってください。採血後の転倒混和や遠心分離前の静置が不十分な場合は、血餅の凝固が不十分となり正しい測定結果が得られない場合があります。なお、遠心分離前の適切な静置時間は、検体の背景(疾患や治療等)により異なりますので注意してください。
- (8) 沈殿物のある検体は、使用前に遠心分離を行い除去してから使用してください。

- (9) 試料中にフィブリンや赤血球、白血球、微小な浮遊物などを認めた場合は、遠心分離をしたりサンプルカップに分取したりするなどして、必ず取り除いてから測定に使用してください。なお、目視できる不溶物が認められない場合でも、測定値に影響を与える物質が試料中に存在することがあります。
- (10) 測定の前に、検体中の気泡の有無を確認してください。気泡がある場合は除いてください。

<妨害物質・妨害薬剤>

- (1) 乳びはホルマジン濁度として 1400 まで、リウマチ因子は 500IU/mL まで、ビリルビンは 18mg/dL まで、ヘモグロビンは 450mg/dL まで測定値に影響は認められませんでした。

<その他>

- (1) 装置での測定には、指定のサンプリングチップおよびサンプルカップを使用してください。
- (2) キャリブレーションの有効期間を超えた場合には、アキュラシード FT3 用キャリブレーターセット(別売品)を用いて再度キャリブレーションを行ってください。
- (3) 検体を希釈して測定しないでください。検体を希釈して測定すると、正しい測定値が得られません。

〔用法・用量(操作方法)〕

<試薬の調製方法>

試薬カートリッジ：そのまま使用してください。

<必要な器具・器材・試料等>

自動分析装置：自動化学発光酵素免疫分析装置 Accuraseed®

検量線用試料：アキュラシード FT3 用キャリブレーターセット(別売品)
使用に際しては、アキュラシード FT3 用キャリブレーターセットの現品説明書を参照してください。

基本検量線シート(付属品)

アキュラシード B/F 分離液(別売品)

アキュラシード サンプリングチップ(別売品)

マイクロピペットおよびサンプルカップ


<測定法>

測定操作の詳細は自動化学発光酵素免疫分析装置 Accuraseed®の取扱説明書を参照してください。

操作法

- (1) 試薬カセットの QR コード*を QR コード読取部に読み込ませます。
- (2) 読み込みが完了した試薬カセットのキャップを外し、試薬庫にセットします(この操作により項目名等の試薬情報管理が自動的に行われます)。
- (3) 「基本検量線」メニューを選択し、付属の「基本検量線シート」の QR コードを QR コード読取部に読み込ませます。
(基本検量線の読み込みはロット毎に行います)
- (4) 検量線の補正は装置のキャリブレーション実施方法に従って行います。
- (5) コントロール、検体を装置の測定方法に従って準備してください。
- (6) 開始ボタンを押し、測定を開始します。
- (7) 測定結果はプリントアウトすることもできます。
(自動化学発光酵素免疫分析装置 Accuraseed®ではプリンターはオプションです)
*QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

プロトコール

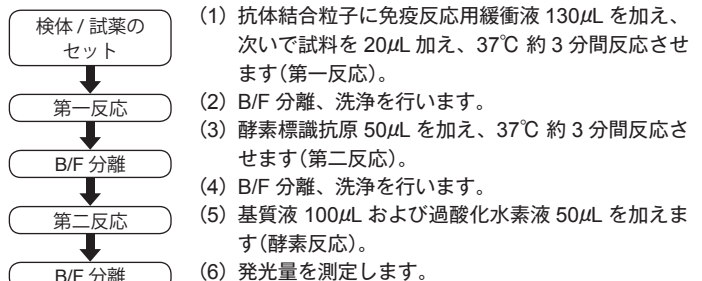

FT3 濃度の求め方

キャリブレーターセットを用いて検量線を作成します。この検量線に検体の発光量を当てはめて、FT3 濃度を求めます。

〔測定結果の判定法〕

参考正常値：2.51～4.16pg/mL(血清)
(193例で測定算出した場合の参考正常値)

<判定上の注意>

- (1) 参考正常値は、測定条件や検体によって異なる場合がありますので、各施設で設定することが望まれます。
- (2) 検体中に非特異反応物質(異好性抗体等)が存在する場合は、正しい測定結果が得られないことがありますので、測定結果の判定は他の検査や臨床症状等を考慮して担当医師が総合的に判断してください。

〔性能〕

<性能>

- (1) 感度
0pg/mLの標準FT3を試料として操作した場合の発光量をAとし、4pg/mLの標準FT3を試料として操作した場合の発光量をBとしたとき、発光量比B/Aの値は0.5以下です。
- (2) 正確性
既知濃度の管理検体を測定したとき、測定値(pg/mL)は既知濃度±20%以内にあります。
- (3) 同時再現性
同一検体を5回同時に測定したとき、測定値(pg/mL)の変動係数(CV)は15%以下です。
- (4) 測定範囲
本キットによるFT3の測定範囲は0.5～26pg/mLです。

<相関性試験成績>

他キットとの相関

検体	血清	血清
相関係数	$r = 0.990 (n=162)$	$r = 0.992 (n=162)$
回帰式	$y = 0.990x + 0.02$	$y = 1.025x - 0.17$
y	本品(pg/mL)	本品(pg/mL)
x	スフィアライト FT3-(S) (識別記号W) (pg/mL)	他社品(pg/mL)

血漿と血清との相関

検体	血漿・血清
相関係数	$r = 0.996 (n=100)$
回帰式	$y = 1.015x - 0.02$
y	本品(血漿 pg/mL)
x	本品(血清 pg/mL)

<較正用の基準物質(標準物質)>

米国薬局方(USP)標準品

〔使用上又は取扱い上の注意〕

<取扱い上(危険防止)の注意>

- (1) 試薬が誤って口や目に入ったり、皮膚に付着した場合には、直ちに大量の水で洗い流し、必要があれば医師の手当等を受けてください。
- (2) 検体はウイルス等の感染の危険性を考慮して取扱ってください。

<使用上の注意>

- (1) 試薬は指定された条件で保管し、使用期限を過ぎたものは使用しないでください。
- (2) 誤って凍結させた試薬は使用しないでください。
- (3) 基本検量線シートは本品の使用が終了するまで保管してください。
- (4) 試薬カセット中の試薬カートリッジは残量管理をしているので、装置以外での試薬カートリッジの抜き取りは行わないでください。また、同一ロットのものであっても試薬カセット中に追加しないでください。
- (5) 装置から抜き取った試薬カセットを、他の装置で使用しないでください。試薬残量が正しく認識されません。
- (6) 試薬カセットを装置から取り出して保存する場合には、直ちにカセットキャップをして天地確認の上、2～10℃で保存してください。カセットキャップをせず保存した場合や、2～10℃の範囲外で保存されていた場合は、この試薬カセットを使用しないでください。
- (7) 試薬カセットに外から強い衝撃を与えないでください。
- (8) 試薬カセットに破損がある場合は使用しないでください。
- (9) 本品中の容器、付属品は他の目的に転用しないでください。

<廃棄上の注意>

- (1) 検体と接触した試薬および試薬容器等は、感染の危険性がありますので、次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度1,000ppm、1時間以上浸漬)による消毒処理あるいはオートクレーブ(121℃、20分以上)による滅菌処理を行ってから廃棄してください。

- (2) 廃棄に際しては廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)、水質汚濁防止法等の規定に従って適切に処理してください。基質液(R3)中にほう素として524mg/Lを含有しています。
- (3) 抗体結合粒子、免疫反応用緩衝液および酵素標識抗原は、保存剤としてアジ化ナトリウムを約0.08%含有しています。アジ化ナトリウムは、銅や鉛などの重金属と結合してアジ化物を形成します。重金属のアジ化物は乾燥状態で衝撃により爆発する性質がありますので、排水後は排水管に残留しないように十分の水で洗い流してください。
- (4) 検体、廃液等が飛散した場合には次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素濃度1,000ppm)、グルタルアルデヒド(2%)等の消毒液を用いてふき取ってください。

〔貯蔵方法・有効期間〕

<貯蔵方法> 2～10℃保存

<有効期間> 製造後1年間

〔包装単位〕

コード番号	品名	包装
474-11651	アキュラシード FT3	60回用 (試薬カセット(20試薬カートリッジ)×3)

* <別売>

コード番号	品名	包装
472-11711	アキュラシード FT3用キャリブレーターセット	1mL×2×2種
470-11631	アキュラシード B/F分離液	10L
475-92641	アキュラシード サンプリングチップ	70本×30

〔主要文献〕

- (1) 山内一征 他：日本臨牀, 43(秋季臨時増刊号下巻), 820(1985)
- (2) 池田 齊：臨床検査, 38(11), 99(1994)
- (3) Thorpe G. H. G., et al：Anal. Biochem., 145, 96(1985)

〔問い合わせ先〕

富士フイルム 和光純薬株式会社

臨床検査薬 カスタマーサポートセンター
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号
TEL：(03)3270-9134(ダイヤルイン)

三洋化成工業株式会社

バイオ・メディカル事業本部
〒605-0995 京都市東山区一橋野本町11番地の1
TEL：(075)541-6317(ダイヤルイン)

製造販売元

三洋化成工業株式会社

京都市東山区本町11丁目721番地
TEL(075)541-6318(ダイヤルイン)

販売元

富士フイルム 和光純薬株式会社

大阪市中央区道修町三丁目1番2号